

便盆椅 使用衛教



一、適用對象(使用時機)：

下肢承重力差；不便前往廁所，需就近採坐姿解便者。

二、使用優點：

方便如廁、方便沐浴、方便移動。

三、使用準則：

1. 確認穩定

(1) 輪椅式便盆椅：

使用前務必確認腳墊、座背墊是否鬆脫、破損或下陷，若為輪型便盆椅，確認四腳煞車皆固定，且最好能將便盆椅靠穩固物，提高後續轉位的安全性。



(2) 固定型輪椅

可配合使用者身高，可按下腳墊上方彈扣調整高度，注意需調節同高度。



2. 正確擺放

依據使用者活動能力調整，原則以靠近使用者為主，若擺放床旁，以放置健側45-90度。

3. 協助轉位

4. 清潔並歸位

四、單位便盆椅使用

1. 固定式便盆椅



注意彈扣同高



如廁後上掀移除便盆

內科病房 製作

諮詢專線：(04)7113456#8791

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人

漢銘基督教醫院


CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2023年05月

修訂日期：2025年05月(二版)

51500-單張-中文-023-02

2.輪椅式便盆椅

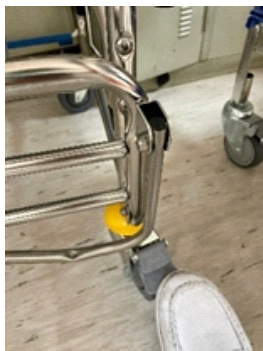

下踩固定。




病人移至便盆椅後下掀踏板。



黑色卡榫向後拉可放下把手。



放下把手平行病床，增加移位安全。

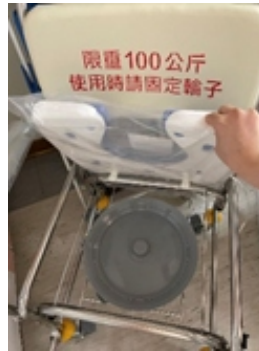

如廁後上掀移除便盆。

五、注意事項：

1. 虛弱或行動不便的使用者，使用便盆椅時需有旁人協助使用，並陪伴在旁。
2. 使用時地上需要保持乾燥清潔和適度的照明，若當沐浴椅使用，請盡量靠牆以避免跌倒。
3. 如腳墊已磨損、鬆脫或無法密合，請立即更換以維持良好抓地與防滑功能。

六、清潔保養方式：

1. 每日以1:10倍稀釋市售漂白水(0.6%)擦拭消毒，針對頑漬亦可使用雙氧水刷除。
2. 輪子需定期上潤滑油並清除附於轉軸上的異物如毛髮。
3. 每次使用完(清潔完)務必擦乾、晾乾。

自我評量(是非題)

- () 1. 使用便盆椅前，需檢查各項功能，確認正常後才可使用。
- () 2. 使用輪椅式便盆椅時，須將輪子固定妥當，才可坐上。

參考資料

基隆市輔具資源中心（無日期）· 便盆椅衛教說明，民112年5月10日，取自：

http://www.klatrc.tw/Upload/Health_educationFile/%E4%BE%BF%E7%9B%86%E6%A4%85%E8%A1%9B%E6%95%99%E5%96%AE.pdf。

長照我挺你（無日期）· 10大便盆椅推薦要點！，民112年5月10號，取自：

<https://longcaretw.com/commode-chair-recommendation/>。

基隆市輔具資源中心（無日期）· 便盆椅，民112年5月10號，取自：

<http://www.hcarc.com.tw/downloads/file/atrc/1041113.pdf>。

題 號	1	2
解 答	0	0